

# Installer TimeSens pour Panel Leader

*Ce tutoriel détaille les prérequis matériel et logiciel ainsi  
que la procédure d'installation et de mise à jour de  
TimeSens pour Panel Leader*

# Conditions requises pour installer le logiciel

- \* **Avoir un accès à Internet** (une fois installé, TimeSens pour Panel Leader peut s'exécuter sans connexion Internet, mais certaines fonctionnalités seront alors non disponibles)
- \* **Avoir un compte TimeSens et un abonnement valide et non expiré** (évaluation, enseignement, tarif réduit ou plein tarif)
- \* **Utiliser un navigateur Web compatible avec le plug-in Silverlight**

# Navigateurs et systèmes d'exploitation compatibles avec le plug-in Silverlight

| Operating System***<br>*         | IE 11     | IE 10     | IE 9      | IE 8      | IE 7     | Firefox 38.x.x | Firefox 42.0.x-52.0.x | Safari 6.x-9.x | Chrome** |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------------------|----------------|----------|
| Windows 10****                   | 12/10/21* | -         | -         | -         | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows 8.1                      | 12/10/21* | -         | -         | -         | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows 8.0                      | -         | 12/01/16* | -         | -         | -        | 12/01/16       | 12/01/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows Server 2012 R2           | 12/10/21* | -         | -         | -         | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows Server 2012              | -         | 12/10/21* | -         | -         | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows 7 SP1                    | 12/10/21* | 12/10/16* | 12/01/16* | 12/01/16* | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows 7                        | -         | -         | 24/07/14* | 24/07/14* | -        | 24/07/14       | 24/07/14              | -              | 24/07/14 |
| Windows Vista SP2                | -         | -         | 11/04/17* | 12/01/16  | 12/01/16 | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows Server 2008 R2 SP1       | 12/10/21* | -         | 12/01/16* | 12/01/16* | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| Windows Server 2008 SP2          | -         | -         | 14/01/20  | 12/01/16  | 12/01/16 | 31/05/16       | 31/12/16              | -              | 30/09/15 |
| MacOS 10.6 (Intel-based)         | -         | -         | -         | -         | -        | 25/02/14       | 25/02/14              | 25/02/14       | -        |
| MacOS 10.7 - 10.11 (Intel-based) | -         | -         | -         | -         | -        | 31/05/16       | 31/12/16              | 31/12/16       | -        |

\* Support du mode 64-bits

\*\* Chrome ne supporte plus le plug-in Silverlight

\*\*\* Edge ne supporte pas le plug-in Silverlight, mais Internet Explorer oui.

\*\*\*\* Les dates du tableau indiquent les dates de fin du support du plug-in Silverlight dans les principaux navigateurs.

Pour consulter la dernière version de ce tableau : <https://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx>.

## Configuration matérielle recommandée

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Windows                 | X86 or x64 (64-bit mode support for IE only) 1.6-gigahertz (GHz) or higher processor with 512-MB of RAM |
| Macintosh (Intel-based) | Intel Core Duo 1.83-gigahertz (GHz) or higher processor with 512-MB of RAM                              |

## Qu'est ce que TimeSens ?



**TimeSens** est un logiciel dédié à l'acquisition et au traitement des données d'analyse sensorielle. **TimeSens** bénéficie de l'expérience et de l'expertise de [ChemoSens](#), la plate-forme d'analyse sensorielle du [CSGA](#). **TimeSens** propose la plupart des protocoles standards de l'analyse sensorielle (profil, tests hédoniques, [DTS](#), [CATA](#), tri libre, napping), ainsi que des protocoles originaux (DTS multi-prises, [PSP](#), ...). Les résultats collectés peuvent être analysés à l'aide de méthodes statistiques traditionnelles ou innovantes.

[Toutes les fonctionnalités de TimeSens...](#)

## Deux logiciels en un !

Il suffit d'un clic à l'expérimentateur pour installer **TimeSens pour Panel Leader**. Après avoir créé un nouveau protocole ou personnalisé un des modèles de séance, l'expérimentateur peut déployer sa séance sur Internet. Dès lors, les panélistes invités à participer à la séance peuvent accéder avec leur navigateur favori à **TimeSens pour Panéliste**. Une fois les données collectées, l'expérimentateur dispose de toute une batterie d'analyses statistiques adaptées au protocole choisi.



[En savoir plus...](#)

### TimeSens pour Panel Leader

**John Doe**

Abonnement annuel: Plein tarif

Date d'expiration: 15/03/2017

Jeton(s): 250

[- Modifier mon compte](#)

[- Souscrire un abonnement](#)

[- Commander des jetons](#)

[- Statut de mon abonnement](#)

[- Installer TimeSens](#)

[- Détacher mon abonnement](#)

[- Déconnecter](#)


### TimeSens pour Panéliste

[Version Windows](#)

[Version Html](#)

Connectez vous à votre compte TimeSens (<http://www.timesens.com>) avec un navigateur Web compatible, puis cliquez sur le lien **Installer TimeSens**.

Si Silverlight n'est pas installé sur l'ordinateur, une fenêtre demandant d'installer le plug-in s'ouvre :

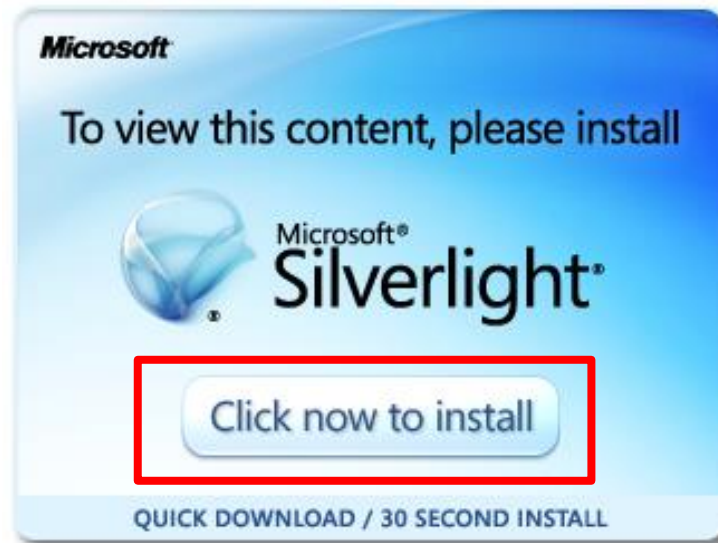

Cliquez sur le bouton **Click now to install**.




Cliquez sur le bouton **Installer maintenant**.

Si l'installation ne se poursuit pas correctement, consultez les instructions depuis le site de Microsoft :

<http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx>

# En fonction des paramètres de sécurité du navigateur, le **plug-in Silverlight** peut être désactivé :

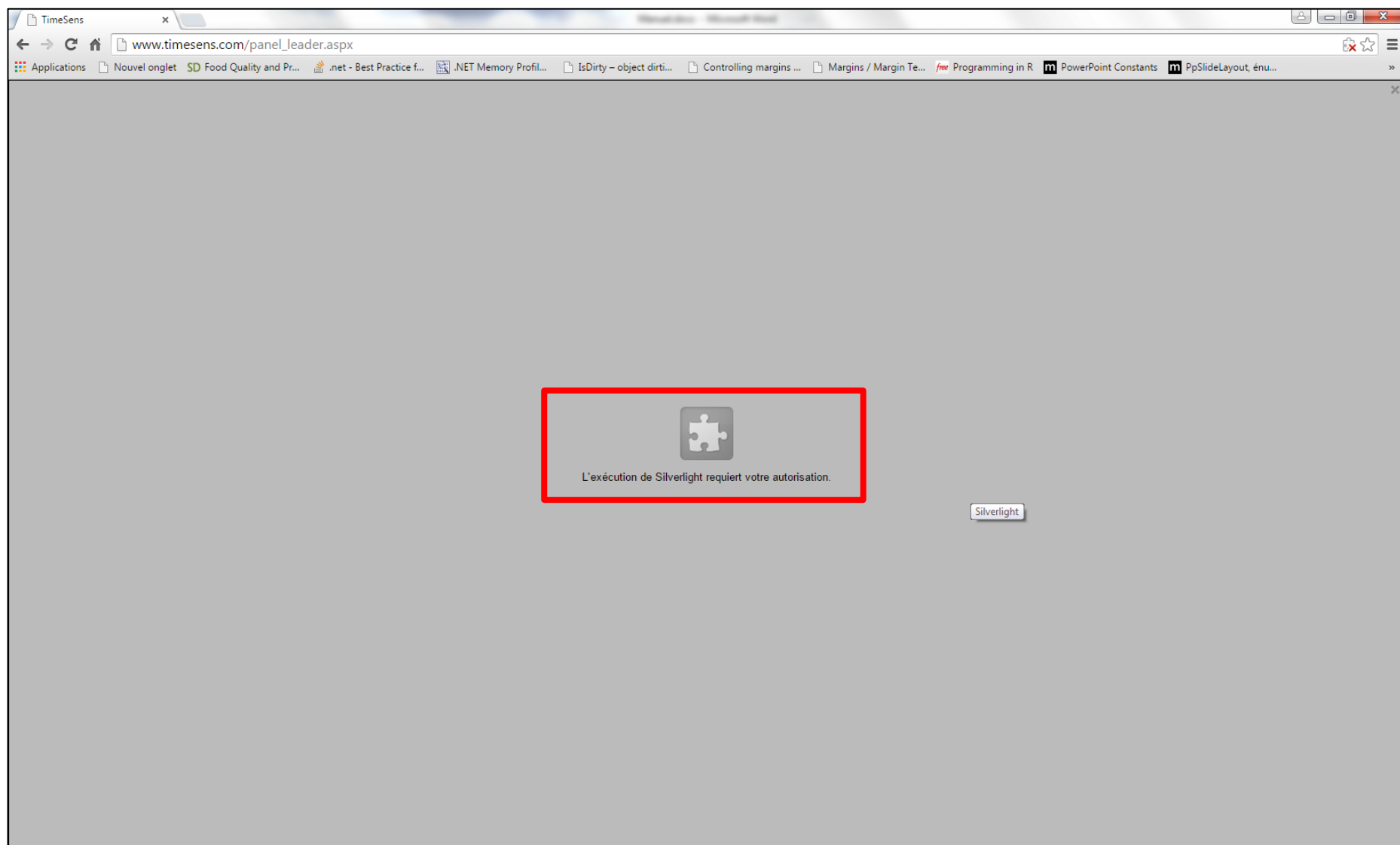

Dans ce cas, il faut activer le plug-in dans le navigateur. Cliquez sur le lien correspondant à votre navigateur pour déterminer la procédure à suivre :


[Activer un plug-in avec Firefox](#)

[Activer un plug-in avec Internet Explorer](#)

[Activer un plug-in avec Opéra](#)

Certains problèmes de communication avec le serveur TimeSens peuvent être dus à des restrictions d'utilisation du réseau définies par l'entreprise (pare-feu). Dans ce cas, il faut contacter l'administrateur réseau pour qu'il lève ces restrictions. **Les éventuels paramètres de proxy doivent être configurés depuis Internet Explorer.**

Une fois Silverlight installé et activé, l'écran suivant s'affiche :

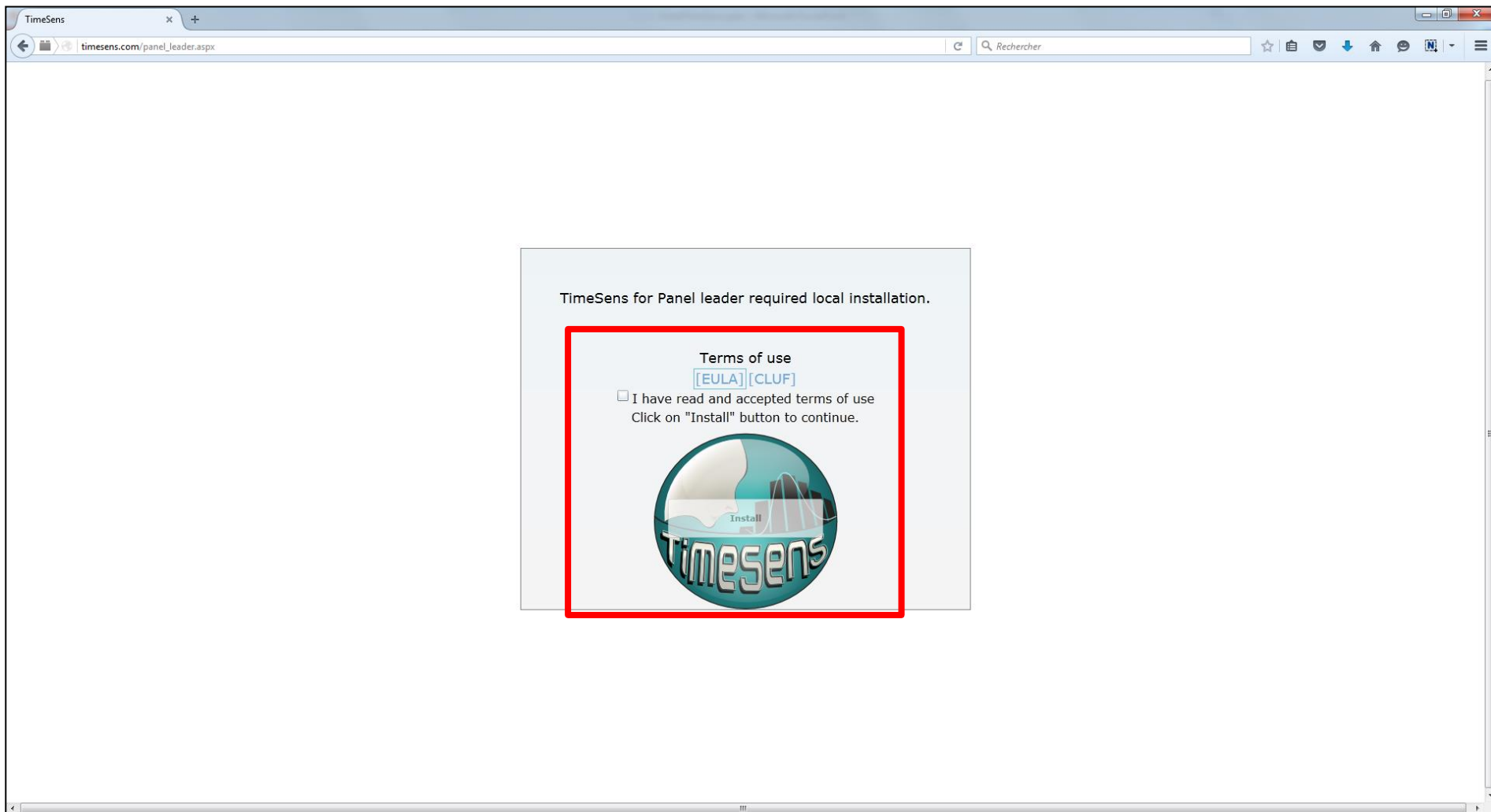


Cliquez sur le lien **CLUF** pour afficher le Contrat de Licence de l'Utilisateur Final (PDF).

Si vous en acceptez les termes, cliquez sur la case **I have read and accepted terms of use**, puis cliquez sur le bouton **Install**.

Si jamais l'avancement l'installation reste bloqué à 100%, faites un clic-droit, puis cliquez sur le bouton **Installer TimeSens sur cet ordinateur**.



Un avertissement de sécurité s'affiche pour signaler que l'application est téléchargée depuis Internet :

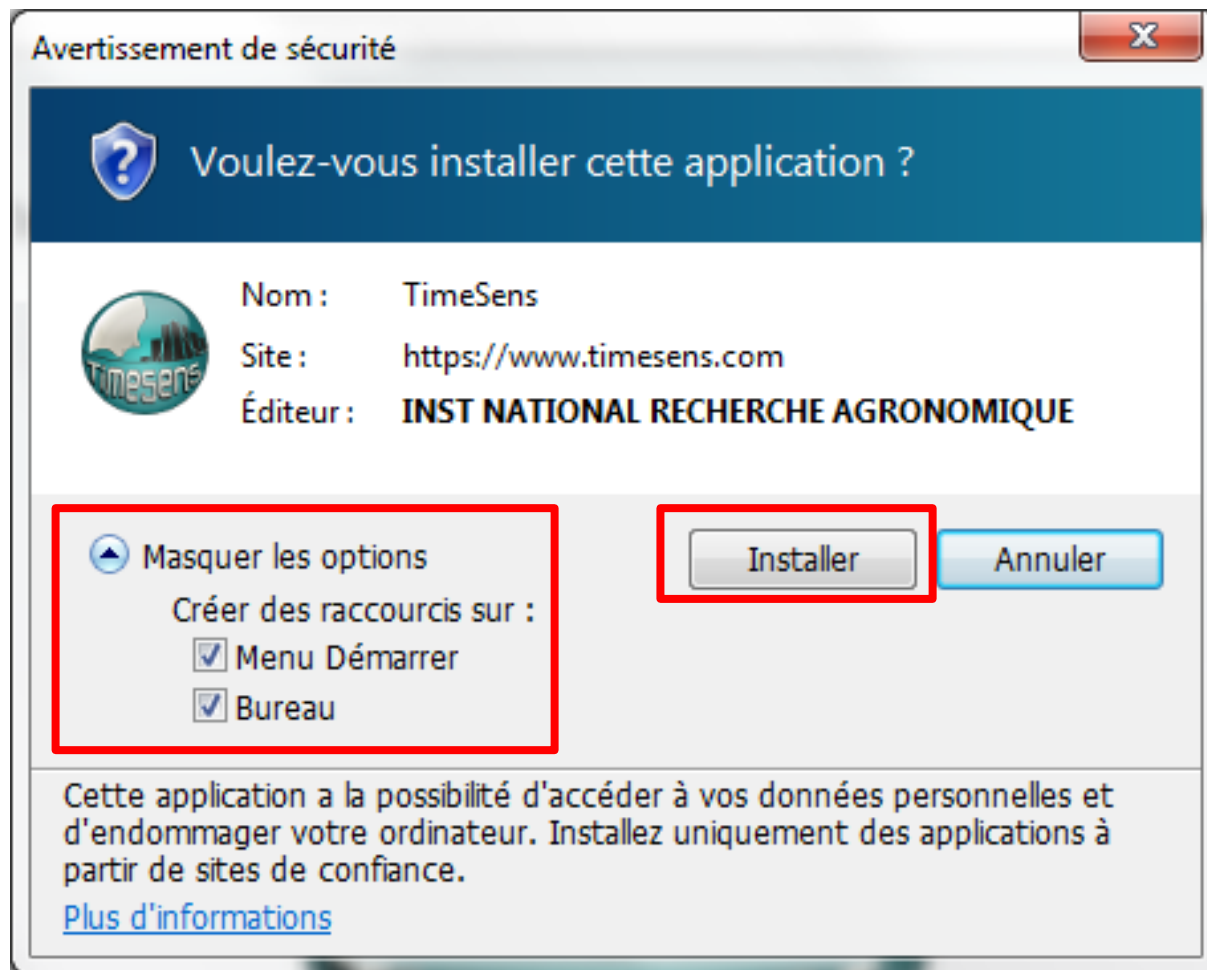


Affichez les options et vérifiez que les options **Menu Démarrer** et **Bureau** sont cochées, puis cliquez sur le bouton **Installer**.

Un raccourci **TimeSens for Panel Leader** doit apparaître sur le bureau et dans la barre de programmes Windows.



Lancez le logiciel en cliquant sur le raccourci créé sur le bureau.

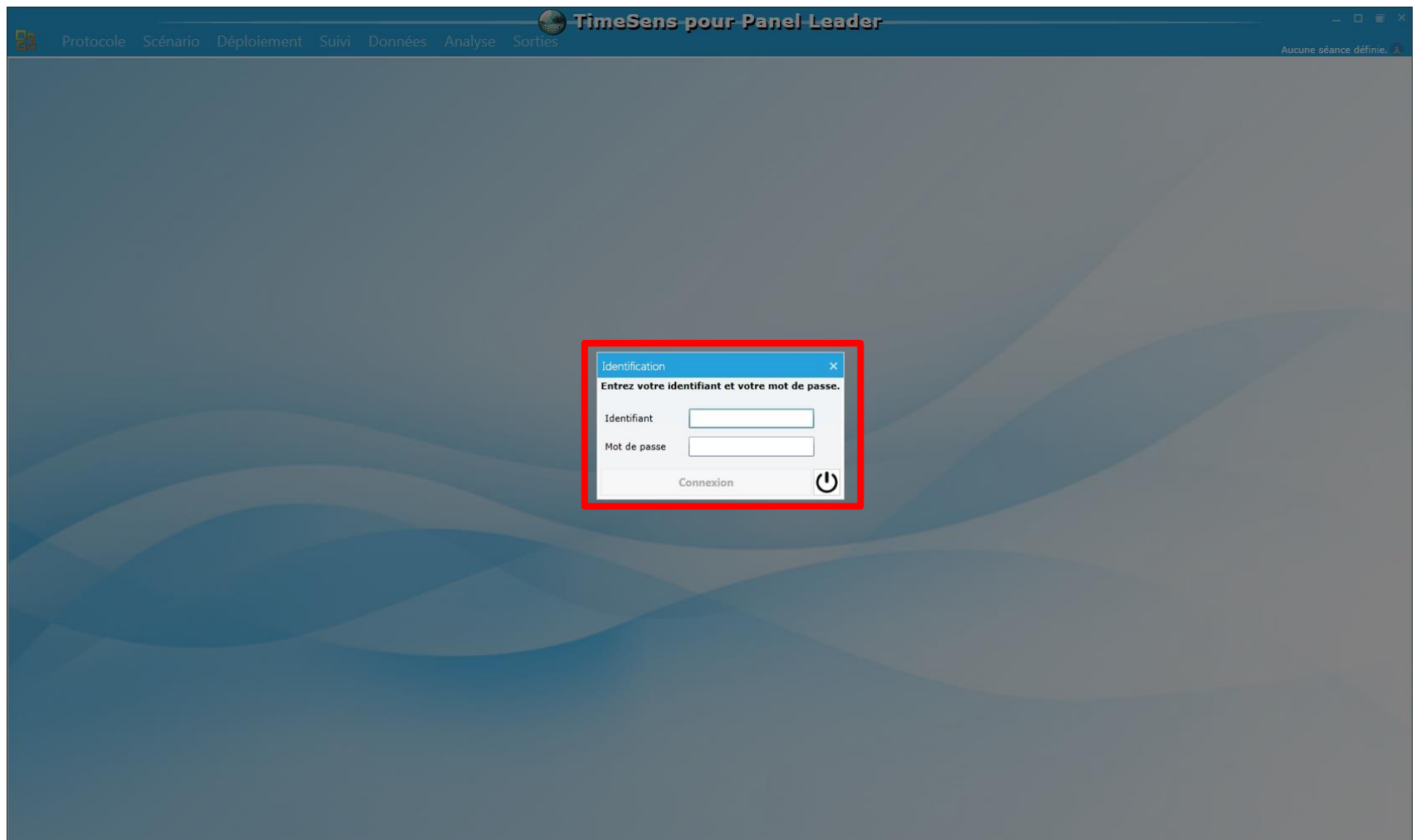

Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte TimeSens associé à un abonnement, puis cliquez sur le bouton **Connexion**.

**Vous pouvez désormais utiliser TimeSens pour Panel Leader.**

**A chaque démarrage du logiciel, l'authentification est automatique. La licence est néanmoins vérifiée à chaque démarrage et à chaque action qui requière une communication avec le serveur TimeSens.**

Si l'application fonctionne en mode connecté (une connexion à Internet est disponible), **les mises à jour sont recherchées à chaque démarrage. Si une mise à jour est détectée, elle est automatiquement installée, mais l'application doit être redémarrée .**

Certaines fonctionnalités du logiciel requièrent un accès à Internet.

## **ATTENTION !**

**Si la date de validité de l'abonnement est dépassée, le logiciel ne pourra plus être utilisé tant que l'abonnement n'aura pas été renouvelé.**

**L'abonnement est propre à un utilisateur et ne doit en aucun cas être transmis (se référer aux termes du CLUF).**

**L'abonnement ne peut être utilisé que sur un seul ordinateur à la fois.**

# Pour continuer...

Plus de tutoriels à venir.